


smiths medical portex®



**BIVONA® NEONATALA
OCH PEDIATRISKA
BLUE LINE ULTRA®
PEDIATRISKA
TRAKEALKANYLER FÖR
INTENSIVVÅRDSAVDELNINGEN**

Varje andetag räknas

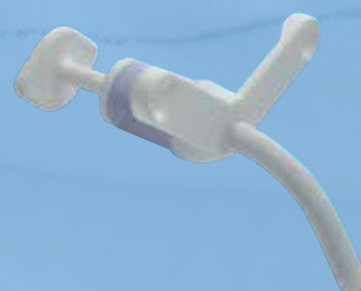


BIVONA® NEONATALA OCH PEDIATRISKA BLUE LINE ULTRA® PEDIATRISKA TRAKEALKANYLER FÖR INTENSIVVÅRDSAVDELNINGEN

VARJE ANDETAG RÄKNAS

Vi erbjuder en hel portfölj av trakealkanyler av silikon och PVC för att uppfylla behoven hos varje patient inom neonatala och pediatrika intensivvårdsavdelningar och andra kliniska områden.

- Första kanylen in efter kanylering – Bivona® silikontrakealkanyler är idealiska som första kanylen in tills patienten är redo för bortagande eller dekanylering. Kanylerna har utformats för att skydda trakealanatomin och minska förekomsten av trakeostomirelaterade trycksår
- Ekonomisk fördel – Bivona® silikonkanyler kan rengöras och återanvändas på samma patient*, vilket förlänger kanylens livslängd på sjukhuset och för patienter som behandlas inom andra kliniska områden
- Kostnadseffektivt – Blue Line Ultra® PVC-kanyler är idealiska som kostnadseffektiva "första kanyler" av PVC eller som tillfälliga MRT-säkra kanyler
- DEHP-fria – Bivona® och Blue Line Ultra® trakealkanyler tillverkas utan skadliga mjukgörare

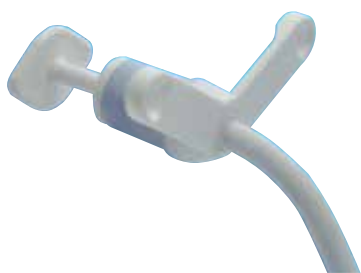

BIVONA® NEONATAL OCH PEDIATRISK TRAKEALKANYL

- Silikon
- Trådförstärkt, förhindrar kanylockklusion
- MRT-säker under vissa betingelser
- Utan skadliga mjukgörare
- FlexTend™ TTS™
- TTS™ (Tight to Shaft) med kuff
- Hyperflex™
- Aire-Cuf®
- Fome-Cuf®
- Kundenpassade alternativ

BLUE LINE ULTRA® PEDIATRISKA KANYLER

- PVC
- Ingen trådförstärkning
- MRT-säker
- Röntgentät
- Utan skadliga mjukgörare
- Rak distal ände
- Underlättar införandet utan en obturator under kanylbyte i nödläge

* Läs den bruksanvisning som medföljer enheten.



Om du vill ha mer information kan du besöka vår webbplats: www.smiths-medical.com

PRODUKTERNA SOM BESKRIVS KANSKE INTE LICENSIERAS ELLER SÄLJS I KANADA OCH ANDRA LÄNDER

Smiths Medical Sverige AB
Box 1143
164 22 Kista, SVERIGE
Tel: 08-594 772 50

Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442, USA
Tel: 1-614-210-7300
Toll-Free USA: 1-800-258-5361

www.smiths-medical.com

Din lokala kontaktinformation finns på: www.smiths-medical.com/customer-support

Smiths Medical är en del av den globala teknikverksamheten Smiths Group plc. Se bruksanvisningen/användarhandboken för en komplett lista över indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet. Portex, Bivona, Blue Line Ultra och Smiths Medical designmärken är varumärken som tillhör Smiths Medical. Symbolen © anger att varumärket är registrerat hos det amerikanska patent- och registreringsverket samt i vissa övriga länder. Alla andra namn och märken som omnämns är varumärken eller servicemärken som tillhör respektive ägare. Angivna produkter är CE-märkta. ©2019 Smiths Medical. Med ensamrätt. TR194500SV-092019

MPAUC-1610

Rx **CE** **CE**
ONLY **2797** **0413**

smiths medical