

smiths medical



リセプタル®

医療用排液吸引システム



リセプタル®は院内の排液を適切、効率的に処理する医療用排液吸引システムです。



安全性 職業感染の予防

- 固化剤とライナーが一体型になることにより、排液を大気にさらすことなく、凝固させます。(一体型ライナーのみ)
- セカンダリライナー(チューブ色 青色)には、0.3μmのバクテリア除去フィルター付きのシャットオフバルブが内蔵されています。



密閉性 落ちない吸引力

- キャニスター上部のリムシールは、ライナーとの密閉性を高め、吸引力を維持します。
- シームレスなライナーは上部のリッドと強固に接着され、出荷前に全数エアリークテストが実施されています。



視認性 排液量の確認が容易

- メモリは円柱状のキャニスターに大きく印字されており、視認性に優れます。
- ライナーに含まれる消泡剤は排液の泡や飛沫の発生を抑えます。



汎用性 カスタマイズが容易なトローリー

- 吸引の切替が容易にできるので、症例に応じて、単使用から4連使用まで変更可能です。(オプション品は必要ありません)
- トローリーの高さ調節が可能です。(630mm~900mm)



2連



2連 + 2連

ライナー

すべてのライナーには、排液の泡や飛沫の発生を防ぐ消泡剤が入っています。
固形化剤ボトルがついているのは、一体型ライナーのみです。

プライマリーライナー

容器がいっぱいになれば、自動的に次のライナーへ流れ込みます。

チューブ色 透明
チューブ先端のアダプタ L型



セカンダリーライナー

シャットオフバルブを内蔵しており、容器がいっぱいになれば自動的に吸引を中止します。

チューブ色 青色
チューブ先端のアダプタ I型



固形化剤ボトル



固形化剤一体型

品番	品名	販売単位
43121S8201 ※1	ライナー 2000mL一体型プライマリー	40個/箱
43120S8201 ※1	ライナー 2000mL一体型セカンダリー・シャットオフバルブ付	40個/箱

排出型

品番	品名	販売単位
0L6548201 ※1	ライナー 1500mL排出型セカンダリー・シャットオフバルブ付	50個/箱
0L6508201 ※1	ライナー 2000mL排出型プライマリー	50個/箱
0L6518201 ※1	ライナー 2000mL排出型セカンダリー・シャットオフバルブ付	50個/箱
0L6569701 ※1	ライナー 3000mL排出型プライマリー	50個/箱
0L6559701 ※1	ライナー 3000mL排出型セカンダリー・シャットオフバルブ付	50個/箱

密封型

品番	品名	販売単位
0L6589701 ※1	ライナー 2000mL密封型プライマリー	50個/箱
0L6599701 ※1	ライナー 2000mL密封型セカンダリー・シャットオフバルブ付	50個/箱
0L6579701 ※1	ライナー 1500mL密封型セカンダリー・シャットオフバルブ付	50個/箱

キャニスター



品番	品名	販売単位
434230421 ※1	キャニスター 1500mL用	1個
434450411 ※1	キャニスター 2000mL用	1個
435036118 ※1	キャニスター 3000mL用*	1個

*リムシールはついていません。

サイズ毎にカラーコーティングされています。
1500mL (水色)、2000mL (黄緑色)、3000mL (青色)
ポリカーボネート製で、耐衝撃性に優れ、滅菌可能です。

固形化剤



品番	品名	販売単位
439808201	リセプタル固形化剤 50g	50個/箱
439818201	リセプタル固形化剤W 100g	25個/箱

トロリータイプ



品番	品名	仕様	販売単位
4347697P2	スタンダードトロリーセットS	トロリー+キャニスターサポート×4 +オンオフバルブ	1台
4347697P3	スタンダードトロリーセットL	トロリー+キャニスターサポート3000mL用×4 +オンオフバルブ	1台
4347697J2	リセプタルトロリーセットS	トロリー+キャニスターサポート×4 +レギュレーターアダプタ	1台
4347697J3	リセプタルトロリーセットL	トロリー+キャニスターサポート3000mL用×4 +レギュレーターアダプタ	1台
43426P8201	キャニスターサポート	1500mL/2000mL用 トロリー対応	1個
43436P8201	キャニスターサポート	3000mL用 トロリー対応	1個


スタンドタイプ



434468201

品番	品名	仕様	販売単位
434328201	スタンドフロアタイプ	2000mL 2連用	1台
434468201	スタンドフロアタイプ	2000mL 4連用	1台
434478201	スタンドフロアタイプ	2000mL 直列4連用	1台
434768201	スタンドフロアタイプ	2000mL 6連用	1台
434758201	スタンドトールタイプ	2000mL 2-6連用(トールタイプ)	1台
434488201	スタンドトールタイプ	2000mL 4連用(トールタイプ)	1台
434048201	チューブコネクター		1個

壁掛け吸引タイプ

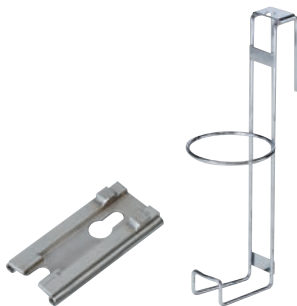

439528201

439568201

品番	品名	仕様	販売単位
439268201	キャニスターサポート	1連1500mL用	1個
439288201	キャニスターサポート	1連1500mL用2穴	1個
434268201	キャニスターサポート	1連2000mL用	1個
439568201	キャニスターサポート	1連2000mL用1穴	1個
434288201	キャニスターサポート	1連2000mL用2穴	1個
434298201	キャニスターサポート	2連2000mL用	1個
434448201	固定用プレート	ネジ型	1個
434458201	固定用プレート	ボール型	1個
439528201	固定用プレート	川重型	1個
439578201	固定用プレート	アムコ型	1個
439588201	固定用プレート	セントラルユニ型	1個

バキュームレギュレーター



439058201

品番	品名	仕様	販売単位
439068201 ※2	バキュームレギュレーター	ネジ型トロリータイプ	1個
439048201 ※2	バキュームレギュレーター	ネジ型	1個
439058201 ※2	バキュームレギュレーター	差込型	1個

アクセサリ



433096111

443000415

434730415

433060411

433050420

439518201

439508201

品番	品名	仕様	販売単位
433060411 ※1	アキュメジャー	(433050420と同時使用)	12個/箱
433050420	キャニスターブラケット		10個/箱
439508201	バキュームアダプター	アムコ型(耐圧ホース付)	1個
439518201	バキュームアダプター	川重型(耐圧ホース付)	1個
443000415 ※1	キャニスターティー		5個/箱
434730415 ※1	リセプタルテーパーMM	外付シャットオフバルブ/チューブ接続用	25個/箱
439538201	三方コネクター		1個
433096111 ※1	外付シャットオフバルブ(スーパーバルブ)		10個/箱
433030411 ※1	スペシメントラップ		24個/箱
434559213	サクシジョンチューブ30.48m		1箱

※1
届出番号: 13B1X10107000059
販売名: リセプタル排液吸引システム

※2
製造販売業者: 株式会社ムラコメディカル
届出番号: 13B1X00254000001
販売名: バキュームレギュレーター

www.smiths-medical.com/jp/

改良のため仕様は予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承ください。
ご使用前に、添付文書、取扱説明書など、製品付随資料を必ずお読みください。

MKOMCA-1017

製造販売業者

スミスメディカル・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-1

お問い合わせ先: 0120-582-855 受注センター

smiths medical

Smiths Medical is part of the global technology business Smiths Group plc. Please see the Instructions for Use/Operator's Manual for a complete listing of the indications, contraindications, warnings and precautions. Smiths brand names (used in document's text), Smiths trade names (used in document's text) and the Smiths Medical and design marks (logos used in document) are trademarks of Smiths Medical. The symbol © indicates the trademark is registered in the U.S. Patent and Trademark Office and certain other countries. All other names and marks mentioned are the trademarks or service marks of their respective owners. ©2019 Smiths Medical. All rights reserved. SM196494JA-072019 1101001-20190730001B3akd