

smiths medical
bringing technology to life



Cathéter à système clos DeltaVen®


Feel the difference,
see the difference™



FEEL THE DIFFERENCE, SEE THE DIFFERENCE™

Il peut se révéler difficile de trouver un cathéter qui résiste à la rigidité de l'injection haute pression. Le cathéter DeltaVen® est conçu pour répondre à tous vos besoins en matière d'injection haute pression.

UN CATHÉTER CONÇU POUR SUIVRE VOTRE PATIENT PARTOUT DANS L'HÔPITAL

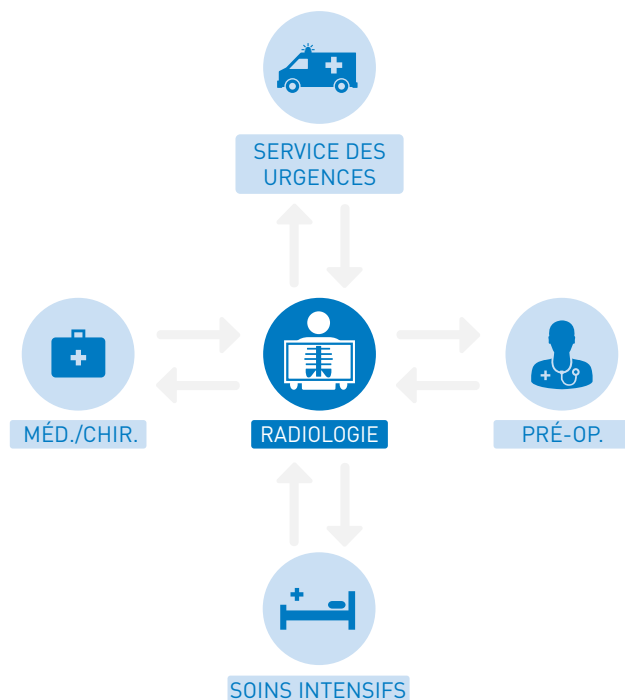

- Le seul cathéter à pression nominale de 330 PSI* avec débit pouvant aller jusqu'à 8 ml par seconde dans un cathéter 20G
- Permet d'éviter une nouvelle piqûre de cathéter en radiologie, pour la tomographie ou dans d'autres services.
- Tubulure d'extension scellée qui réduit le risque de contamination dû aux déconnexions et reconnexions répétées

*Consultez le mode d'emploi fourni avec le dispositif pour obtenir une liste complète des indications et des précautions.

PRESSION NOMINALE DE 330 PSI POUR LES GAUGES 24 À 16G

Gauge du cathéter IV	Longueur du cathéter IV (mm)	Débit max. à 20 °C (ml/sec)	Débit max. à 37 °C (ml/sec)
24G	19	4	5
22G	19	5	6
	25	5	5
20G	25	7	8
	32	6	7
	45	6	7
18G	25	8	9
	32	7	9
16G	45	7	9
	32	>10	>10

Produit de contraste utilisé : IOMERON 400 avec viscosité de 27,5 mPa.s. à 20 °C et 12,6 mPa.s. à 37 °C.
Données Delta Med archivées.

Cathéter à système clos DeltaVen® - Dispositif médical de classe IIb - FABRICANT : Delta Med s.p.a. (Italie) - ORGANISME NOTIFIÉ : TÜV (CE0123) - INDICATIONS : DeltaVen® est un cathéter pour accès veineux périphérique et sous-cutané qui, associé à d'autres dispositifs périphériques, permet de prélever des échantillons de sang et d'administrer des liquides. DeltaVen® est destiné à être utilisé pendant une durée inférieure à 30 jours. Avant toute première utilisation, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation.



Pour de plus amples consultez notre site www.smiths-medical.com/deltaven

DOCUMENTATION DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ.
LES PRODUITS DÉCRITS PEUVENT NE PAS ÊTRE ENREGISTRÉS OU DISPONIBLES À LA VENTE AU CANADA OU DANS D'AUTRES PAYS.

Distribué par :
Smiths Medical France
3, rue du Pont des Halles
94656 RUNGIS Cedex
Tél: +33 (0)1 58 42 50 00
Email : france@smiths-medical.com

Fabriqué par :
Delta Med SpA
Via G. Rossa, 20-46019
Viadana (Mn) - Italy
0375 785915

MPAUC-1777

**Rx
ONLY**

smiths medical

Smiths Medical appartient à Smiths Group plc, une entreprise mondiale axée sur l'innovation technologique. Se référer aux instructions de la notice d'utilisation/manuel utilisateur pour une description détaillée des produits et la liste complète des indications, contre-indications, mises en garde et précautions d'emploi. Le logo Smiths Medical est une marque commerciale de Smiths Medical. Le symbole © signifie que la marque a été déposée auprès de l'office des brevets des États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms et marques mentionnés sont des marques de commerce ou des marques de service de leurs détenteurs respectifs. Le produit référencé porte le marquage CE. © 2017 Smiths Medical. Tous droits réservés. SS195459FR-092017