

smiths medical

bringing technology to life

donner vie à la technologie

LA solution de réchauffement rapide lorsque cela compte le plus
Réchauffeurs / accélérateurs de fluides Level 1[®]



TEMPERATURE MANAGEMENT

LEVEL 1TM

Un nouveau pas pour une sécurité accrue

Les tubulures pour réchauffeurs/accélérateurs H1000 et H1200 sont désormais équipées d'un ensemble filtre/dégazeur offrant une sécurité supplémentaire : en cas de présence d'air, une valve ferme automatiquement la ligne patient. Ce système permet de détecter puis d'évacuer l'air, y compris lorsque l'appareil est hors tension.

Nouvel ensemble filtre/dégazeur F-50

- Retient les particules contenues dans les fluides par un filtre 170µ.
- Empêche l'air éventuellement apparu dans la tubulure de passer au patient.
- Evacue l'air seul afin de ne pas entraver la procédure en cours.

F-10 et F-30



F-50




Les ensembles filtre/dégazeur F-10 et F-30 sont remplacés par le nouvel ensemble filtre/dégazeur F-50



Smiths Medical offre une large gamme de tubulures adaptées à tous types de situations


DI-65HL

- Débit max : 530ml/min
- Système exclusif 3 voies évitant le refroidissement du fluide
- Recommandée pour les procédures nécessitant des débits variables

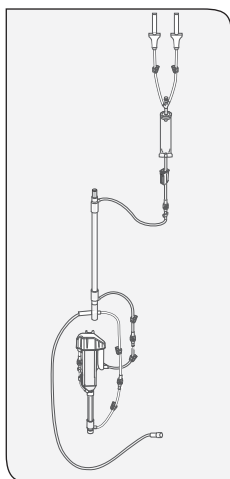


DI-75

- Débit max : 750ml/min
- Recommandée pour les procédures provoquant des pertes de sang importantes

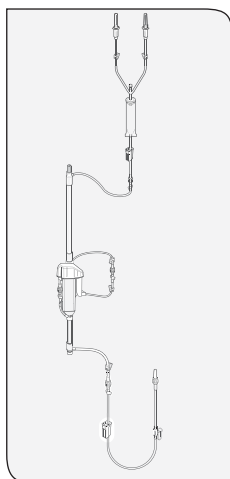


DI-150

- Débit max : 950ml/min
- Recommandée pour les cas de trauma

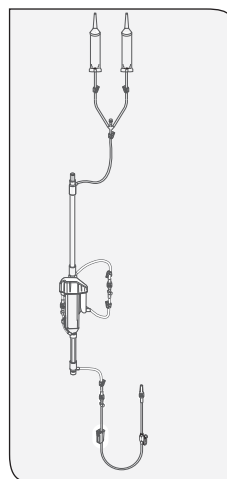

DI-350

- Débit max : 1400ml/min
- Recommandée pour les cas de trauma importants ou de transplantations

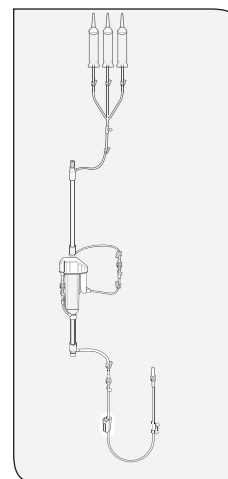

Débit +/-10% ; température ambiante +/-20°C

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE BROCHURE SONT CONFORMES AUX PRODUITS AU MOMENT DE L'IMPRESSION. SMITHS SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER ULTÉRIEUREMENT LES PRODUITS PRÉSENTÉS.

Smiths Medical France

3, rue du Pont des Halles - 94656 RUNGIS Cedex

Tél : 01 58 42 50 00 - Fax : 01 58 42 50 30

e-mail : morl.info@smiths-medical.com

www.smiths-medical.fr

Smiths Medical - Une division de Smiths Group plc

Level1 et Smiths Medical sont des marques déposées de Smiths Group plc.

TM194838FR-0610

smiths medical